



Silk'n®  
Beautiful Technology

FaceTite™

Руководство пользователя

Компания Home Skinovations Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или спецификации с целью улучшения их характеристик, надежности или возможности изготовления. Предполагается, что информация, предоставленная компанией Home Skinovations Ltd. является точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd. не принимает на себя ответственность за использование этой информации. На патенты и патентные права компании Home Skinovations Ltd. не предоставляется никаких прямых, косвенных или иных лицензий. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения компании Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения. Компания Home Skinovations Ltd. владеет патентами и заявками на патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также иными правами интеллектуальной собственности, имеющими отношение к предмету данного документа. Предоставление данного документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые наименования, авторские права или иные права интеллектуальной собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией Home Skinovations Ltd. в соответствии с письменным соглашением. Спецификации могут изменяться без предупреждения.

Home Skinovations Ltd. Табор Билдинг, Шаар Йокнеам POB 533, Йокнеам 2069206, ИЗРАИЛЬ [www.silk'n.co.il](http://www.silk'n.co.il), [info@silk'n.co.il](mailto:info@silk'n.co.il)

## Содержание

<b>1. Перед началом использования .....</b>	<b>2</b>
1.1 Описание прибора Silk'n FaceTite .....	2
1.2 Комплектация .....	3
<b>2. Целевое назначение Silk'n FaceTite .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Меры безопасности при использовании Silk'n FaceTite .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Противопоказания .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Когда следует отказаться от использования Silk'n FaceTite .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Чего следует ожидать при применении .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Возможные побочные эффекты .....</b>	<b>6</b>
<b>8. Начало работы .....</b>	<b>7</b>
<b>9. Режим обработки .....</b>	<b>8</b>
9.1 Зоны для выполнения процедуры .....	9
<b>10. Обслуживание Silk'n FaceTite .....</b>	<b>10</b>
10.1 Очистка Silk'n FaceTite .....	10
<b>11. Устранение неполадок .....</b>	<b>10</b>
<b>12. Обслуживание клиентов .....</b>	<b>11</b>
<b>13. Рабочие характеристики .....</b>	<b>11</b>
<b>14. Маркировка .....</b>	<b>12</b>

# 1. Перед началом использования

Перед тем как начать использование Silk'n FaceTite, полностью прочитайте данный буклет инструкции по применению и посмотрите обучающее видео Silk'n FaceTite.

Обратите особое внимание на разделы, посвященные порядку использования устройства, его работе и действиям после использования.

Рекомендуем ознакомиться с Руководством пользователя перед каждым использованием Silk'n FaceTite.

Silk'n FaceTite является мощным электрическим прибором. Поэтому его следует использовать, уделяя особое внимание безопасности.

Перед использованием прочтите все предупреждения и меры предосторожности и следуйте им при использовании Silk'n FaceTite.




**Держите прибор подальше от детей!**

## 1.1 Описание прибора Silk'n FaceTite

Silk'n FaceTite является устройством для обработки кожи лица с эффектом противодействия старению, работающим на основе технологии RT™. В этой технологии сочетается применение трех видов энергии: инфракрасное излучение (ИК), которое воздействует на верхний слой кожи, улучшая ее фактуру; низкоинтенсивную лазерную терапию (НИЛТ), которая воздействует на дерму и вызывает ее омоложение и восстановление коллагена, а также сфокусированную биполярную радиочастотную энергию (биполярная РЧ), которая проникает в жировой слой под дермой, укрепляя глубокие ткани и уменьшая формирование морщин.

Silk'n® FaceTite снабжен АППЛИКАТОРОМ (1) с тремя ЭЛЕКТРОДАМИ (2) и ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНОПКОЙ (3), которая окружена пятью ИНДИКАТОРНЫМИ ЛАМПОЧКАМИ (4).

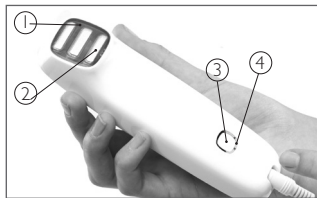

- ① АППЛИКАТОР
- ② ЭЛЕКТРОДЫ
- ③ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА
- ④ ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ

## 1.2 Комплектация

Открыв упаковку Silk'n FaceTite, вы найдете следующие детали:

- Устройство Silk'n FaceTite
- Флакон скользящего геля
- Настенный адаптер постоянного/переменного тока
- Этот буклет инструкции по применению
- Футляр для хранения

## 2. Целевое назначение Silk'n FaceTite

Устройство Silk'n FaceTite предназначено для улучшения текстуры кожи, поддержания упругости кожи, восстановления коллагена и избавления от морщин. Silk'n FaceTite предназначено для применения на щеках, лбу, подбородке, шее и зоне вокруг глаз.

**Обратите внимание:** Silk'n FaceTite предназначен как для обработки собственного лица, так и для обработки лица других людей.

## 3. Меры безопасности при использовании Silk'n FaceTite

### Silk'n FaceTite защищает вашу кожу

Устройство Silk'nFaceTite™ снабжено уникальным встроенным термическим датчиком, предназначенным для измерения температуры кожи и стабилизации излучаемой тепловой энергии.

Во избежание перегрева, уникальная встроенная система тепловой стабилизации внутри аппарата Silk'n FaceTite измеряет температуру обрабатываемой кожи во время сеанса. При обнаружении повышения температуры (42–43 °C), стабилизатор автоматически прекращает выделение тепла, пока температура кожи не понижается в достаточной степени для того чтобы стабилизатор продолжал нагрев.

**Внимание!** Прежде чем начать обработку, убедитесь, что устройство плотно прижато к вашей коже!

## 4. Противопоказания

### Важная информация о безопасности - Прочтите перед использованием!

Аппарат Silk'n FaceTite подходит не всем. Перед использованием аппарата прочитайте и обдумайте информацию, изложенную в нижеследующем разделе. Чтобы получить дополнительные сведения или совет в зависимости от личной ситуации, можно также посетить сайт [www.silkn.com](http://www.silkn.com) или местный сайт, посвященный Silk'n™.

- Не используйте Silk'n FaceTite если вы являетесь носителем кардиостимулятора, внутреннего дефибриллятора или любого иного активного электрического имплантата внутри организма.
- Не используйте Silk'n FaceTite если вы являетесь носителем постоянного имплантата в обрабатываемой области, например — металлических пластин и винтов, силиконовых имплантатов или инъеклируемого химического вещества.
- Не используйте Silk'n FaceTite если у вас в настоящее время или в прошлом имело место онкологическое или предраковое заболевание.
- Не используйте Silk'n FaceTite если в течение последних 3 месяцев вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии.
- Не используйте Silk'n FaceTite в период беременности или кормления грудью.
- Не используйте Silk'n FaceTite если у вас ранее наблюдались заболевания, стимулируемые тепловым воздействием, например, рецидивирующий простой герпес в обрабатываемой области. Если эти заболевания наблюдались, вы можете использовать только профилактический режим.
- Не используйте Silk'n FaceTite если вы страдаете от плохо контролируемых эндокринных заболеваний, например, диабета или заболеваний щитовидной железы.
- Не используйте Silk'n FaceTite если вы страдаете от эпилепсии.
- Не используйте Silk'n FaceTite если вы страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др.
- Если имеются любые другие обстоятельства, из-за которых использование прибора, по мнению вашего врача, будет небезопасно.
- Проконсультируйтесь с врачом, если в течение 6 последних месяцев вы обрабатывали кожу выписанным им лекарством.
- Не используйте Silk'n FaceTite если у вас имеется любое активное заболевание в обрабатываемой области, такое как язвы, псориаз, экзема, сыпь.
- Не используйте Silk'n FaceTite если вы перенесли любое хирургическое вмешательство на обрабатываемой области в течение 3 месяцев до лечения.

## 5. Когда следует отказаться от использования Silk'n FaceTite

Аппарат не следует использовать с дополнительными принадлежностями или аксессуарами, не рекомендованными компанией Home Skinovations Ltd.

- Если в устройстве поврежден шнур или вилка.
- Если вы видите дым или чувствуете его запах во время работы прибора.
- Если прибор плохо работает или поврежден.
- Если ТЕРМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК поврежден или сломан.
- Если внешний корпус поврежден или распадается на части.
- Во время купания или на влажной или мокрой коже. Немедленно отключите аппарат если он упадет в воду.

**Предупреждение:** держите Silk'n FaceTite вдали от воды! Не кладите и не храните Silk'n FaceTite там, где он может упасть, где его могут столкнуть или поместить в ванну, раковину или в любой другой сосуд с водой.

## 6. Чего следует ожидать при применении Silk'n FaceTite

Для многих людей применение Silk'n FaceTite может быть первым опытом использования нагревающего аппарата, предназначенного для эпиляции в домашних условиях. Во время сеанса обработки могут возникнуть такие типичные впечатления или ощущения, как:

- Ощущение прилива тепла: Это ощущение связано с использованием биполярной РЧ-энергии.
- Легкое покраснение или припухлость: Эти явления должны пройти в течение срока от нескольких часов до одного дня.

## 7. Возможные побочные эффекты:

Ярко выраженное покраснение и/или отёчность (избыточная припухлость): редкая реакция кожи на процедуры, которая обычно проходит в течение нескольких дней.

В случае проявления указанных симптомов - немедленно охладить обработанную зону холодной водой в течение 10 минут и нанести средство против ожогов.

\* Пользователям, страдающим купорозом и розацеа, необходимо проконсультироваться с дерматологом перед началом использованием прибора.

При болях, покраснении, отеке или жжении необходимо проконсультироваться с врачом.

## 8. Начало работы

1. Достаньте ЭПИЛЯТОР Silk'n FaceTite и его части из коробки.
2. Включите АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО тока в гнездо на аппарате Silk'n FaceTite.
3. Подключите АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО тока к электрической розетке. Все пять индикаторных лампочек начнут попеременно мигать.
4. Теперь устройство находится в режиме ГОТОВНОСТИ и готово к началу работы.
5. Нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ. Устройство автоматически перейдет на энергетический уровень Включится одна ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА.

### **Установка уровня энергии:**

- В аппарате Silk'n FaceTite предусмотрено 5 уровней энергии, отображаемых 5 ИНДИКАТОРНЫМИ ЛАМПОЧКАМИ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ.
- Выбранный уровень энергии определяет количество энергии, доставляемой аппаратом Silk'n FaceTite в вашу кожу.
- Для того, чтобы задать уровень энергии, нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ несколько раз для перехода между уровнями энергии от 1 до 5 и от 5 обратно к 1.
- После того как будет задан уровень энергии, ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ будут обозначать выбранный уровень.
- Чтобы перевести FaceTite™ в режим готовности, нажмите и удерживайте ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ. Все пять лампочек будут непрерывно гореть.
- Если вы захотите изменить уровень энергии в середине сеанса обработки, снова нажмите на кнопку. Это сразу же изменит режим уровня энергии и позволит вам обрабатывать один и тот же или несколько участков различными количествами энергии соответственно вашим потребностям

6. После установки уровня энергии для обработки, нанесите тонкий слой геля Silk'n Slider на область предполагаемой обработки.

**Обратите внимание:** гель Slider (или любой другой прозрачный гель на водной основе) обеспечивает гладкость перемещения аппликатора по коже, а также проводимость. В целях безопасности и эффективности обработки, перед ее началом всегда наносите гель Slider!



7. Прижмите устройство к необходимому участку кожи. Вы почувствуете легкое тепло. Перемещайте устройство осторожными массажными линейными движениями по желаемой области обработки. Проводите обработку медленно и осторожно.

**Обратите внимание:** чтобы устройство работало должным образом, оно должно плотно прилегать к коже! Выполняйте непрерывными перемещениями без трения и поддерживайте полный контакт трех электродов с кожей.

8. Сразу же после обработки нанесите лосьон для лица или маску.

## 9. Режим обработки

### Первая процедура

**Выберите соответствующий энергетический уровень для определенного участка лица:**

- Начните с энергетического уровня 1 в течение нескольких минут (см. инструкцию по выполнению процедуры ниже).
- Постепенно повышайте энергетический уровень в течение нескольких минут от предыдущего уровня.
- Остановитесь на самом высоком энергетическом уровне, при котором вы все еще чувствуете себя комфортно.
- Для максимального клинического эффекта рекомендуется достичь наивысшего энергетического уровня.

### Последующие процедуры:

- Установите последний комфортабельный для вас энергетический уровень.
- Нанесите тонкий слой геля на участок лица, для которого будет проводиться процедура.
- Повторяйте процедуру два раза в неделю в течение 10 недель. Для поддержания результатов лечения повторяйте процедуру раз в 2 недели.
- Для достижения максимальных результатов – процедура для каждой зоны должна длиться, по крайней мере, 15 минут.



## 9.1 Зоны для выполнения процедуры

**1. ЛОБ**  
включая межбровье  
*Увеличение упругости кожи*

**2. ПРАВАЯ ЩЕКА**  
включая зону вокруг глаз  
*Для разглаживания  
мелких морщин и  
увеличения объема*

**3. ЛЕВАЯ ЩЕКА**  
включая зону вокруг глаз  
*Для разглаживания  
мелких морщин и  
увеличения объема*

**4. ВЕРХНЯЯ ГУБА**  
Включая носогубную  
складку  
*Для увеличения  
упругости кожи и  
удаления морщин*

**5. ПОДБОРОДОК**  
Включая линию  
подбородка  
*Увеличение упругости  
кожи и V-шейпинг*

**6. ШЕЯ**  
Разглаживание морщин

**ЛОБ**

увеличение  
упругости кожи

**ЩЕКИ**

придание  
объема

**ВЕРХНЯЯ ГУБА**

удаление морщин

**ЛИНИЯ ПОДБОРОДКА**

V-шейпинг

**ПОДБОРОДОК**

увеличение  
упругости

**ЗОНА ВОКРУГ  
ГЛАЗ**


разглаживание

**НОСОГУБНАЯ  
СКЛАДКА**

увеличение

**ШЕЯ**

разглаживание  
морщин

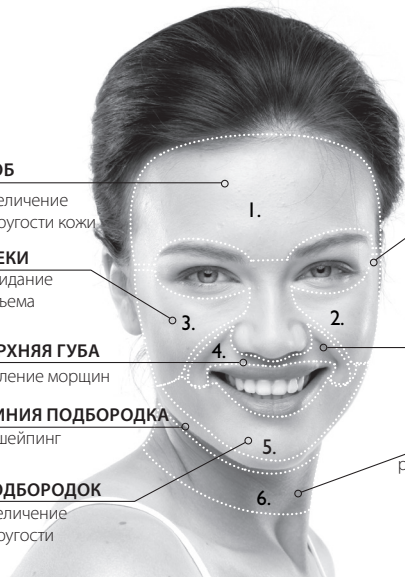

## 10. Обслуживание Silk'n FaceTite

Всегда храните Silk'n FaceTite в специальном футляре для хранения, предоставленном вместе с прибором. Храните Silk'n FaceTite вместе с БЛОКОМ ПИТАНИЯ в прохладном сухом месте, недоступном для детей.

### 10.1 Очистка Silk'n FaceTite

- Перед чисткой отключите Silk'n FaceTite от сети электропитания. Рекомендуется чистить аппарат Silk'n FaceTite, особенно АППЛИКАТОР, после каждого сеанса.
- Осторожно уберите остатки геля с АППЛИКАТОРА с помощью абсорбирующей бумаги (например, туалетной бумаги или салфеток для вытирания рук).
- Никогда не погружайте Silk'n FaceTite или любые его части в воду!

## 11. Устранение неполадок

**«Мой аппарат Silk'n FaceTite не включается».**

- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ правильно подсоединен к устройству FaceTite™.
- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ включен в настенную электрическую розетку.

**«Тепловая энергия не излучается и я не чувствую никакого тепла, исходящего от аппарата, хотя я и нажала ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ».**

- Тепло не будет излучаться, пока вы не приложите АППЛИКАТОР к вашей коже. Это функция безопасности. Прежде чем начать обработку, убедитесь, что устройство плотно прижато к вашей коже.

Тепло не будет излучаться с ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, если не использовать смазочный гель или если нанесенный ранее гель высох. Нанесите смазочный гель на участок, для которого вы планируете процедуру, непосредственно перед процедурой.

- Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить ваш аппарат Silk'n FaceTite. Ремонт может осуществлять только уполномоченный персонал Silk'n™.
- **Попытка открыть Silk'n FaceTite также может испортить аппарат и аннулирует гарантию. Если ваш аппарат поврежден или требует ремонта, свяжитесь с отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.**



Когда срок службы аппарата Silk'n FaceTite закончится, аппарат нужно будет должным образом утилизировать. Доставьте его до ближайшего электронного пункта сбора электронных отходов для безопасной и эффективной утилизации.

## 12. Обслуживание клиентов

Более подробную информацию о продуктах Silk'n, пожалуйста, посетите наш веб-сайт [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il).


Если ваше устройство сломано, повреждено, нуждается в ремонте или любой другой помощи, пожалуйста, позвоните в наш сервисный центр через веб-сайт по адресу: [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il), по электронной почте: [contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il) или телефон: 1-700-700-309.


Наши представители обслуживания клиентов будут рады помочь Вам!


## 13. Рабочие характеристики


RT™		Технология
620 нм ± 20 нм;	Длина волны красного света	
850 нм ± 20 нм;	Длина волны инфракрасного света	
1 МГц ± 30 %; 12 Вт макс	Радиочастота	
Стабилизатор тепла, предотвращающий перегрев кожи		Работа и безопасность
22 см x 22 см x 9 см		Размер упаковки
125 г		Вес системы
от 10 °C до 35 °C	Работа	Температура
От -40 до +70 °C	Хранение	
От 30 до 75 %	Работа	Относительная влажность
От 10 до 90 %	Хранение	
700–1060 гПа	Работа	Атмосферное давление
500–1060 гПа	Хранение	
Модель: KSA24A1200150HE	Адаптер	
100–240 В; 50–60 Гц; 0,5 А	Номинальная	
12 В пост. тока; 1,5 А	Мощность	

## 14. Маркировка

 Оборудование класса II

 WEEE - Утилизация электрического и электронного оборудования

 Знак CE

 Не используйте этот прибор во влажной среде.  
Степень защиты от попадания воды: обычная

Это устройство не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющейся смеси анестетика с воздухом, кислородом или закисью азота.



The logo features a dark grey, wavy, brushstroke-like graphic element above the text.

HomeSkinovations™

[contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il)

[www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il)