



Silk'n®  
Beautiful Technology

FaceTite™

הוראות שימוש

הום סקינבייזנס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במוצריה או במפרטים לשיפור הביצועים, האמינות או התפעול. המידע הניתן ע"י הום סקינבייזנס בע"מ נחשב מדויק ואמין בזמן פרסומו. עם זאת, הום סקינבייזנס בע"מ אינה נושאת בשום אחריות לשימוש בו. אין רשות להשתמש במשתמע ממנו או אחרת תחת שום פטנט או זכויות לפטנט של הום סקינבייזנס בע"מ. שום חלק ממסמך זה לא יועתק או ישודר בשום דרך, אלקטרונית או מכנית, לשום מטרה, ללא אישור בכתב של הום סקינבייזנס בע"מ. הנתונים עשויים להשתנות ללא הודעה. הום סקינבייזנס בע"מ היא בעלת פטנטים ובקשות לרישום פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות לקניין רוחני הנוגעות למסמך זה. אספקת המסמך אינה מקנה למחזיק בו כל זכות בפטנטים, הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים וזכויות לקניין רוחני אלה, אלא אם ניתנו בהסכם כתוב של הום סקינבייזנס בע"מ. המפרט נתון לשינויים ללא הודעה. הום סקינבייזנס בע"מ בנין תבור, שער יוקנעם ת.ד. 533, יוקנעם 2069206, ישראל. [contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il), [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il)

## תוכן העיניים

1. לפני שמתחילים..... 2
- 1.1 תיאור מכשיר Silk'n FaceTite..... 2
- 1.2 תכולת האריזה..... 3
2. השימוש הייעודי של מכשיר Silk'n FaceTite..... 3
3. הוראות בטיחות לשימוש ב- Silk'n FaceTite..... 3
4. התוויות נגד..... 4
5. אין להשתמש ב-Silk'n FaceTite במקרים הבאים..... 5
6. למה לצפות בזמן הטיפול עם Silk'n FaceTite..... 5
7. תופעות לוואי אפשריות בשימוש ב-Silk'n FaceTite..... 6
8. בואו נתחיל!..... 7
9. שגרת טיפולים..... 8
- 9.1 אזורי הטיפול..... 9
10. תחזוקה שוטפת של Silk'n FaceTite..... 10
- 10.1. ניקוי Silk'n FaceTite..... 10
11. פתרון בעיות..... 10
12. שירות לקוחות..... 11
13. מפרט..... 11
14. תיוג..... 12

## 1. לפני שמתחילים

לפני כל שימוש ב-Silk'n FaceTite, יש לקרוא ביסודיות את המדריך למשתמש מתחילתו ועד סופו. מומלץ לצפות בסרטון ההדרכה. יש לחזור ולעיין במדריך לפני כל שימוש במכשיר.


Silk'n FaceTite הוא מכשיר חשמלי רב עצמה, ולכן יש להשתמש בו בתשומת לב רבה ובזהירות. לפני השימוש יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות, האזהרות ואמצעי הבטיחות ובמהלך הטיפול יש להקפיד לפעול לפיהם.

שמור הרחק מהיג ידם של ילדים!



### 1.1 תיאור מכשיר Silk'n FaceTite

Silk'n FaceTite הוא מכשיר אנטי אייג'ינג המיועד לטיפול באזורי הפנים והצוואר, העושה שימוש בטכנולוגיית RT. טכנולוגיה זו משלבת שלושה סוגים של אנרגיה: קרינה אינפרא אדומה (IR) המשפיעה על השכבה העליונה של העור ומשפרת את מרקמו, טיפול לייזר ברמה נמוכה (LLLT) המגיע עד שכבת הדרמיס וגורם להצטרת העור על ידי שיקום והאצת ייצור הקולגן, וקרינה ביפולרית ממוקדת בתדר רדיו (RF Bi-Polar) החודרת לעומק הרקמה אל תוך שכבות השומן התת עורי לצורך מיצוק הרקמה והפחתת הקמטים.

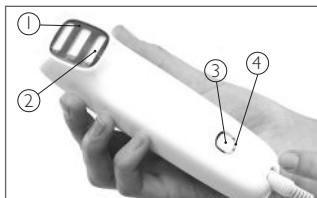

- ① משטח טיפול
- ② אלקטרודות
- ③ כפתור מרכזי
- ④ נוריות חיווי

ל- Silk'n FaceTite

- (1) משטח טיפול (2) שלוש אלקטרודות (3) כפתור מרכזי
- (4) חמש נוריות חיווי המקיפות את הכפתור המרכזי.

## 1.2 תכולת האריזה

כאשר פותחים את אריזת Silk'n FaceTite ניתן למצוא את החלקים הבאים:

- מכשיר Silk'n FaceTite
- ג'ל סליידר (Slider Gel)
- ספק כוח
- מדריך למשתמש
- מארז מהודר

## 2. השימוש הייעודי של מכשיר ה- Silk'n FaceTite

Silk'n FaceTite מיועד לשיפור מרקם העור ומיצוק העור, שיקום הקולגן והפחתת הקמטים. Silk'n FaceTite מתאים לשימוש בפנים באזורי: הלחיים, המצח, הסנטר, האזור שמסביב לעיניים ואזור הצוואר.

שים לב: Silk'n FaceTite מיועד לשימוש עצמי ולא מסחרי.

## 3. הוראות בטיחות לשימוש ב- Silk'n FaceTite

### Silk'n FaceTite מגן על עורך

- על מנת להגן על עורך, Silk'n FaceTite מצויד במנגנוני בטיחות המעניקים לך חווית שימוש נעימה ובטוחה.
- חיישן טמפרטורה מובנה המבטיח שהטמפרטורה באזור המטופל לא תחרוג מזו הנדרשת  $42^{\circ}\text{C}$ - $43^{\circ}\text{C}$ .
  - המכשיר מופעל רק כאשר הוא נמצא במגע ישיר עם העור.

יש לוודא כי משטח הטיפול של המכשיר מוצמד לעורך לפני תחילת הטיפול.

יש להימנע משימוש ב-Silk'n FaceTite אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים!

**Silk'n FaceTite אינו מיועד לכלום. אנא קראו בעיון את המדריך לפני השימוש. לקבלת מידע נוסף ניתן להתקשר לשירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1-700-700-309, או לבקר באתר [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il)**

- אם יש לך קוצב לב או דפיברילטור פנימי או כל שתל חשמלי פעיל בכל מקום בגוף.
- אם יש לך שתל קבוע באזור הטיפול כגון פלטת מתכת או ברגים, שתלי סיליקון או חומר כימי מוזרק.
- אם יש לך היסטוריה או מצב קיים של סרטן או שומות טרום סרטניות.
- אם עברת טיפולים בהקרנות או טיפולי כימוטרפיה במהלך 3 החודשים האחרונים.
- אם את בהריון או מניקה.
- אם יש לך היסטוריה של מחלות המגורות על ידי חום למשל אירועים חוזרים של הרפס סימפלקס באזור המטופל. אם כן תוכלי לטפל רק לאחר משטר תרופות מנע.
- אם את/ה סובל מהפרעה הורמונלית שאינה נשלטת, כגון סוכרת או הפרעה של בלוטת התריס, יש להיוועץ עם רופא.
- אם את/ה סובל מאפילפסיה.
- אם יש לך מחלה הקשורה לרגישות לאור כגון פורפיריה, התפרצות אור פולימורפית, סרפדת שמש, זאבת, וכדומה.
- אם יש לך כל מצב רפואי אחר אשר לדעתו של הרופא שלך יהפוך את הטיפול שלך ללא בטוח.
- אם עורך טופל בתרופות מרשם במהלך ששת החודשים האחרונים, יש להיוועץ עם רופא.
- אם על פני העור כתמים כהים, בעלי גוון כהה, חום או שחור, סימני לידה, שומות, יש להיוועץ עם רופא.
- אם יש לך כל מצב רפואי פעיל באזור הטיפול, כגון פצעים, פצעים פתוחים, יבלות, חבורות או זיהומים פעילים כמו פצעי קור, יש להמתין לריפוי האזור הנגוע לפני הטיפול.
- אם יש לך מצב רפואי פעיל כמו פסוריאזיס, אקזמה או פריחה.
- אם עברת ניתוח כלשהו באזור הטיפול במהלך שלושת החודשים האחרונים לפני הטיפול.

## 5. אין להשתמש ב-Silk'n FaceTite במקרים הבאים:

- אם המכשיר מופעל באמצעות תקע, מחבר או אביזר אחר שלא סופק באריזה המקורית של המכשיר ואינם מומלצים על ידי חברת הום סקינוביישנס בע"מ.
- אם כבל החשמל או התקע ניזוקו.
- אם את/ה רואה או מריח עשן כאשר המכשיר בשימוש.
- אם המכשיר אינו עובד כראוי או נראה פגום.
- אם חיישן הטמפרטורה שלו סדוק או שבור.
- אם המעטפת החיצונית סדוקה, או מתפרקת.
- כאשר המכשיר לח או רטוב. במידה והמכשיר נפל למים, יש לנתקו מיידית מן החשמל.

אזהרה: שמור את מכשיר Silk'n FaceTite הרחק ממים! אין להניח או לאחסן את Silk'n FaceTite במקום בו הוא עלול ליפול לאמבטיה, כיור או כל כלי קיבול המכיל מים.

## 6. למה לצפות בזמן הטיפול עם Silk'n FaceTite

עבור משתמשים רבים השימוש ב-Silk'n FaceTite עשוי להיות הנסיון הראשון עם מכשיר ביתי המבוסס על טכנולוגיות חום.

להלן תופעות נורמליות בהן ניתן לחוש בעת טיפול ב-Silk'n FaceTite:

- **תחושת חום:** במהלך הטיפול ב-Silk'n FaceTite, ייתכן שתחושי חום קל. זאת בגלל השימוש בטכנולוגיית bi-polar RF energy. זוהי תופעה נורמלית והיא אמורה להיעלם עד שעה לאחר הטיפול.
- **אדמומיות /או נפיחות קלה:** לאחר כל טיפול במכשיר Silk'n FaceTite ייתכן שתבחיני באדמומיות קלה בעור או נפיחות קלה באזור המטופל. זוהי תופעה נורמלית האמורה להתפוגג עד 24 שעות.

## 7. תופעות לוואי אפשריות בשימוש ב-Silk'n FaceTite

כאשר נעשה שימוש על פי ההוראות, תופעות לוואי וסיבוכים הקשורים לשימוש במכשיר Silk'n FaceTite הם נדירים. עם זאת, כל פרוצדורה קוסמטית, כולל כזו המיועדת לביצוע ביתי, כרוכה במידה מסוימת של סיכון. לכן, עליך להבין ולקבל את הסיכונים והסיבוכים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש במכשירים מבוססי אנרגיה המיועדים לשימוש ביתי. טיפולים במכשיר Silk'n FaceTite בדרך כלל נסבלים ואינם גורמים לתחושת אי נוחות. רוב המשתמשים חשים בחום מתון על גבי אזור הטיפול בזמן השימוש במכשיר, מבלי שהדבר יהיה כרוך באי נוחות בלתי סבירה.

**אדמומיות חריגה ולא נפיחות:** תגובה נדירה לטיפול אשר ברוב המקרים תתפוגג תוך מספר ימים. כאשר סימנים אלה מופיעים יש לקרר מיד את איזור הטיפול במים קרים במשך 10 דקות, ולמרוח תכשיר נגד כוויית.

\* משתמשים הסובלים מקופרוז או רוזיציה: יש להיוועץ ברופא עור לפני השימוש.

- יש להפסיק את הטיפול אם עורך אדום מאד.
- יש להתייעץ עם רופא במקרים של כאב, אדמומיות בעור, נפיחות או תחושת צריבה שלא נעלמו תוך 24 שעות.

## 8. בואו נתחיל

1. הוצא/י את מכשיר ה-Silk'n FaceTite מתוך המארז המהודר.
2. חבר/י את ספק הכח לשקע ה - Silk'n FaceTite.
3. חבר/י את ספק הכח לשקע החשמל. כל חמש נוריות החיווי ידלקו בסבב אחת אחר השנייה.
4. המכשיר נמצא כעת במצב המתנה ומוכן לשימוש.
5. לחץ/י על הכפתור המרכזי, המכשיר יידלק לרמת אנרגיה 1 באופן אוטומטי, נורית החיווי 1 תידלק.

### קביעת רמת האנרגיה:

- ל-Silk'n FaceTite ישנן 5 רמות אנרגיה מ 1 (הנמוכה ביותר) עד 5 (הגבוהה ביותר) והן מיוצגות באמצעות חמש נוריות חיווי.
  - הרמה שבחרת קובעת את עצמת האנרגיה המועברת לעורך באמצעות Silk'n FaceTite.
  - על מנת לקבוע את רמת האנרגיה, יש ללחוץ על הכפתור המרכזי שוב ושוב כדי לעבור בין רמות האנרגיה 1 - 5 ואז בחזרה לרמה 1.
  - נוריות החיווי של רמת האנרגיה יציגו את רמת האנרגיה שנבחרה.
  - כדי להחזיר את Silk'n FaceTite בחזרה למצב המתנה, יש ללחוץ על הכפתור המרכזי לחיצה ארוכה. כל חמשת נוריות חיווי העוצמה ימשיכו להסתובב בזו אחר זו.
  - ניתן לשנות את רמת האנרגיה באמצע הטיפול על ידי לחיצה על הכפתור המרכזי. רמת האנרגיה תשתנה מיידית ותאפשר טיפול באותו אזור או באזורים שונים ברמות אנרגיה שונות לפי צרכיך.
6. לאחר שקבעת את רמת האנרגיה, יש למרוח שכבה דקה של ג'ל Silk'n Slider על האזור שבו בחרנו לטפל.

Silk'n Slider Gel (או כל ג'ל שקוף על בסיס מים אחר) מאפשר תנועה חלקה על פני העור באזור המטופל. הג'ל מאפשר הולכה יעילה ונוחה יותר של האנרגיה. כדי למקסם את יעילות הטיפול, יש להתחיל תמיד עם מריחה של Slider Gel!



7. יש להצמיד את משטח הטיפול אל העור באזור המטופל. תורגש תחושה קלה של חום. יש להניע את המכשיר בתנועות עיסוי ישרות ( מימין לשמאל או מלמעלה כלפי מטה) על האזור המטופל ולהתקדם באטיות ובזהירות.

על מנת שהמכשיר יעבוד ביעילות, יש להצמיד את משטח הטיפול אל העור.

8. מיד לאחר הטיפול יש למרוח קרם לחות לפניים או מסכת פנים.

## 9. שגרת טיפולים

### טיפול ראשון:

עליך לבחור את רמת האנרגיה המתאימה לאזור הטיפול המיועד:


- יש להתחיל ברמת אנרגיה 1 למשך מספר דקות.
- יש להעלות את רמת האנרגיה בהדרגה למספר דקות בכל רמה.
- יש לעצור ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר בה אתם חשים בנוח.
- מומלץ להגיע לרמת האנרגיה הגבוהה ביותר לקבלת תוצאות מיטביות.



### טיפולים נוספים:

- יש להדליק את המכשיר ולקבוע את רמת האנרגיה הנוחה עבורך.
- יש למרוח שכבה דקה של סליידר ג'ל על האזור המטופל (פנים, צוואר).
- יש להשתמש ב-Silk'n FaceTite בשבוע למשך 10 שבועות, לאחר מכן יש לטפל אחת לשבועיים על מנת לשמר את התוצאות.
- לקבלת תוצאות מיטביות - יש לטפל 15 דקות בכל אזור.

## 9.1 אזורי הטיפול

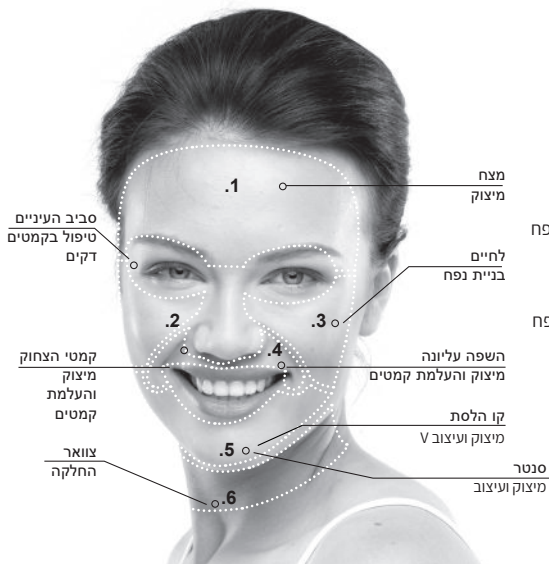

### 1. מצח

כולל האזור שבין הגבות  
מיצוק

### 2. לחי ימין

כולל סביב העיניים  
טיפול בקמטים דקים ובניית נפח

### 3. לחי שמאל

כולל סביב העיניים  
טיפול בקמטים דקים ובניית נפח

### 4. שפה עליונה

כולל הקפל הנאזולביאלני  
(קמט הצחוק)  
העלמת קמטים

### 5. סנטר וקו הלסת

מיצוק ועיצוב V

### 6. צוואר

החלקה

## 10. תחזוקה שוטפת של Silk'n FaceTite

שמור/י את מכשיר Silk'n FaceTite במארז המהודר שהגיע עם המכשיר.  
אחסן/י את Silk'n FaceTite ואת ספק הכח במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

### 10.1 ניקוי Silk'n FaceTite

- לאחר כל טיפול, מומלץ לנקות את Silk'n FaceTite ובייחוד את משטח הטיפול.
  - יש לנתק את Silk'n FaceTite מן החיבור לחשמל לפני הניקוי.
  - יש להשתמש בנייר סופג (לדוגמה: מגבות נייר) כדי לנגב בעדינות את שאריות הג'ל ממשטח הטיפול.
  - לעולם אין לטבול את Silk'n FaceTite או חלקים ממנו במים!
- כאשר Silk'n FaceTite הגיע לסוף תקופת השימוש, אין להשליכו עם הפסולת הביתית הרגילה. יש להשליך את המכשיר בתחנת איסוף פסולת למחזור מכשירי חשמל. לקבלת מידע ניתן להתקשר לתחנות מחזור הפסולת באזור מגוריך.



## 11. פתרון בעיות

### מכשיר Silk'n FaceTite אינו פועל.

- יש לוודא כי ספק הכח מחובר כראוי למכשיר Silk'n FaceTite.
  - יש לוודא כי ספק הכח מחובר לשקע בקיר.
- לאחר הדלקת המכשיר אין תחושה של חום הנפלט ממשטח הטיפול.**
- לא ייפלט כל חום אם משטח הטיפול אינו צמוד לעורך. זוהי תכונה של בטיחות. יש לוודא כי המכשיר מוצמד בצורה הדוקה לעורך לפני תחילת הטיפול.
  - לא ייפלט חום ממשטח הטיפול אם לא נעשה שימוש בג'ל Slider, יתכן שהג'ל שמרחת יבש ואינו מוליך את האנרגיה. עליך למרוח ג'ל Slider על האזור המיועד לטיפול מיד לפני הטיפול.

אין לנסות לפתוח ולתקן את מכשיר ה - Silk'n FaceTite שלך. רק איש צוות מורשה של Silk'n FaceTite מורשה לבצע תיקונים. פתיחת המכשיר עלולה לקלקל אותו ולבטל את תוקף האחריות שבידיך.

## 12. שירות לקוחות

למידע נוסף אודות מוצרי Silk'n, אנא בקר/י באתר שלנו [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il)  
אם מכשירך נשבר, ניזוק, טעון תיקון או כל סיוע אחר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו:

אתר האינטרנט: [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il)  
דוא"ל: [contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il)  
טלפון: 1-700-700-309.

נציגי שירות הלקוחות שלנו ישמחו לעזור לך!

## 13. מפרט

RT	טכנולוגיה	
$620\text{nm} \pm 20\text{nm}$	אורכי גל של אור אדום	
$850\text{nm} \pm 20\text{nm}$	אורכי גל אינפרה אדום	
MHz $\pm 30\%$ ; 12W max 1	תדר רדיו	
מייצב חום למיניעית התחממות יתר של העור	הפעלה ובטיחות	
22 °C על 22 °C על 9 °C	גודל החבילה	
125 גר'	משקל המערכת	
10°C עד 35°C	הפעלה	טמפרטורה
-40 עד +70°C	אחסון	
30 עד 75%rH	הפעלה	לחות יחסית
10 עד 90%rH	אחסון	
700 עד 1060 hPa	הפעלה	לחץ אטמוספרי
500 עד 1060 hPa	אחסון	
דגם: KSA24A1200150HE	מתאם	
100-240V; 50-60Hz; 0.5A	דירוג	
12Vdc; 1.5A	פלט	

ציוד דרגה II

WEEE - פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

סימון CE

אין להשתמש בסביבה רטובה

דרגת הגנה מפני מים חודרים: רגילה

מכשיר זה אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובת הרדמה דליקה עם אוויר או עם חמצן או תחמוצת החנקן.



The logo features a stylized, dark grey wave-like graphic above the text.

HomeSkinovations™

[contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il)

[www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il)