

## © זכויות יוצרים 2011 הום סקינביישנס בע"מ. כל הזכויות שמורות.

תאריך הדפסה: יולי 2014

הום סקינביישנס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשונויים במוצריה או במפרטים לשיפור הביצועים, האמינות או התפעול. המידע ניתן ע"י הום סקינביישנס בע"מ נחשב מדויק ואמין בזמן פרסומו. עם זאת, הום סקינביישנס בע"מ אינה נושאת באחריות לשימוש בו. אין רשות להשתמש במשתמע ממנו או אחרת תחת שום פגנט או זכויות לפגנט של הום סקינביישנס בע"מ. שום חלק ממסמך זה לא יועתק או ישודר בשום דרך, אלקטרונית או מכנית, לשום מטרה, ללא אישור בכתב של הום סקינביישנס בע"מ. הנתונים זעירים להשתנות ללא הודעה. הום סקינביישנס בע"מ היא בעלת פגנטים ובקשות לרישום פגנטים. זכויות יוצרים או זכויות לקנין רוחני הנוגעות למסמך זה. אספקת המסמך אינה מקנה למחזיק בו כל זכות בפגנטים, הימנים המסחריים, זכויות היצרים וזכויות לקנין רוחני אלה אלא אם ניתנו בהסכם כתוב של הום סקינביישנס בע"מ. המפרט נתון לשינויים ללא הודעה.

הום סקינביישנס בע"מ היא בעלת פגנטים ובקשות לרישום פגנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות לקנין רוחני הנוגעות למסמך זה. אספקת המסמך אינה מקנה למחזיק בו כל זכות בפגנטים, הימנים המסחריים, זכויות היצרים וזכויות לקנין רוחני אלה אלא אם ניתנו בהסכם כתוב של הום סקינביישנס בע"מ. המפרט נתון לשינויים ללא הודעה.

הום סקינביישנס בע"מ ניתן תבור, שער יוקנעם ת.ד. 533, יוקנעם 20692, ישראל. [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il), [contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il)

## תוכן העניינים

1. לפני שמתחילים..... 2
- 1.1 תיאור מכשיר **Silk'n Silhouette™**..... 2
- 1.2 תכולת המארז..... 3
2. יעדי השימוש ב **Silk'n Silhouette™**..... 3
3. בטיחות בשימוש ב **Silk'n Silhouette™**..... 3
4. אזהרות בטיחות..... 4
5. אין להשתמש ב **Silk'n Silhouette™** במקרים הבאים:..... 5
6. התחילי את השימוש!..... 5
7. שגרת טיפול..... 7
- 7.1 למה לצפות בזמן הטיפול ב **Silk'n Silhouette™**?..... 9
- 7.2 לאחר הטיפול ב **Silk'n Silhouette™**?..... 10
8. תחזוקת **Silk'n Silhouette™**..... 10
- 8.1 ניקוי **Silk'n Silhouette™**?..... 10
9. פתרון בעיות..... 10
10. שרות לקוחות..... 11
11. מפרט..... 11
12. תוויות..... 12

## 1. לפני שמתחילים



לפני השימוש הראשון ב־ Silk'n Silhouette™, יש לקרוא את הוראות השימוש במלואן ולצפות בסרטון ההדרכה. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחלקים הנוגעים בתהליך השימוש במכשיר, בתפעולו ובתחזוקתו לאחר השימוש. אנו ממליצים לרענן את הזיכרון ולקרוא את ההוראות לפני כל שימוש.

Silk'n Silhouette™ הינו מכשיר חשמלי רב עוצמה, ולכן יש להשתמש בו תוך תשומת לב מיוחדת לבטיחות. יש לקרוא את כל האזהרות ואמצעי ההגנה לפני השימוש, ולמלא אחריהן בקפדנות בזמן השימוש ב־ Silk'n Silhouette™.

### 1.1 תיאור מכשיר Silk'n Silhouette™

ל־ Silk'n Silhouette™ משטח טיפול עם ארבע אלקטרודות וחישן טמפרטורה תרמי, כפתור ברירת מצב טיפול ורצועה מתכווננת.

- ① רצועה מתכווננת
- ② כפתור ברירת מצב טיפול
- ③ מרית חייוי מצב טיפול
- ④ משטח טיפול עם ארבע אלקטרודות
- ⑤ חישן תרמי טמפרטורה
- ⑥ מריות טיפול LED

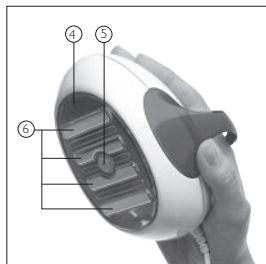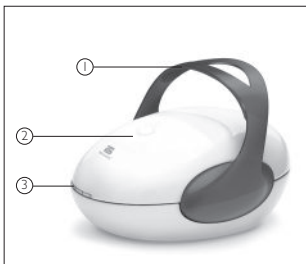

## 1.2 תוכן המארז

עם פתיחת המארז של Silk'n Silhouette™ יימצאו בו החלקים הבאים:

- מכשיר לטיפול בצלולים™ Silk'n Silhouette™
- שפורפרת גל
- ספק כח
- מדריך זה למשתמש

## 2. יעדי השימוש ב Silk'n Silhouette

™ Silk'n Silhouette משמש לטיפול בצלולים והצרת היקפים.

## 3. בטיחות בשימוש ב Silk'n Silhouette

### ™ Silk'n Silhouette מן על עורך

ב Silk'n Silhouette™ מותקן חיישן חום מובנה שתפקידו למדוד את טמפרטורת העור ולייצב את אנרגיית החום הנפלטת מהמכשיר.

על מנת למנוע חימום יתר, מודד החיישן את טמפרטורת שטח העור המטופל תוך כדי הטיפול. אם טמפרטורת העור עולה מעל 42-43 מעלות צלסיוס, החיישן מפסיק אוטומאטית את פליטת החום מהמכשיר. כשטמפרטורת העור חוזרת למידה נמוכה מספיק, המייצב מאפשר למכשיר לשוב ולפלוט אנרגיית חום וניתן להמשיך בטיפול.

הערה: וודאו שהמכשיר מוצמד לשטח פני העור לפני תחילת הטיפול!



### מידע בטיחותי חשוב - יש לקרוא לפני השימוש!

- ™ Silk'n Silhouette אינו מיועד לכלל אדם. יש לקרוא ולשקול את המידע המופיע בפסקה הבאה בטרם השימוש. למידע נוסף ולייעוץ אישי אפשר לבקר באתר [www.silk'n.co.il](http://www.silk'n.co.il).
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette אם מותקן בגופך קוצב לב, דפיברילאטור או כל שתל אלקטרוני פעיל אחר המותקן במקום כלשהו בגוף.
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette אם מותקן בגופך בשטח הטיפול שתל קבוע כמו לוחית ובורגי מתכת, שתל סיליקון או חומר כימי מוזרק.
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette אם יש לך היסטוריה של סרטן, מצב סרטני קיים, או שומות היכולות להפוך ממאירות.
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette אם עברת טיפול בהקרנות או כימותרפיה בשלושת החודשים האחרונים.
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette בתקופות ההיריון או ההנקה.
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette אם קיימת בשטח המטופל היסטוריה רפואית של מחלות המתעוררות עקב גירוי בחום, כמו הישנות הרפס סימפלקס. אם קיים מצב כזה, ניתן לטפל בעור רק לאחר קבלת טיפול מונע.
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette אם קיימות הפרעות הורמונאליות לא מיוצבות כגון סוכרת והפרעות בפעילות בלוטת התריס.
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette אם קיימת אפילפסיה.
- אין להשתמש ב™ Silk'n Silhouette אם קיימת מחלה הקשורה לרגישות לאור, כגון פורפיריה, polymorphic light eruption, סרפדת שמש, זאבת, לופוס וכיוב'.
- אם קיים כל מצב אחר שלדעת הרופא שלכם, הוא מצב לא בטוח לטיפול במכשירים מסוג **Silk'n Silhouette**.
- אם עורכם טופל במהלך ששת החודשים האחרונים בתרופות מרשם, יש להיוועץ ברופא.
- אין לטפל ב™ Silk'n Silhouette באזורים בהם קיימת אקזמה פעילה, פסוריאזיס, חבורות, פצעים פתוחים או זיהומים, או פריחה.
- אין לטפל ב™ Silk'n Silhouette באזורים בהם עברתם ניתוח בשלושת החודשים שקדמו לתחילת הטיפול.

## 5. אין להשתמש ב Silk'n Silhouette במקרים הבאים:

- עם חלקים או אבזרים נלווים שאינם מומלצים על ידי חברת הום סקינוביישינס בע"מ.
- אם כבל החשמל או התקע ניזוקו.
- אם אתם רואים או מריחים עשן כאשר המכשיר נמצא בשימוש.
- אם המכשיר אינו פועל כשורה או נראה פגום.
- אם החיישן התרמי סדוק או שבור.
- אם המארז החיצוני סדוק או מתפרק.
- יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של הום סקינוביישינס בע"מ.

## 6. התחילי את השימוש!

1. יש להוציא את מכשיר ה Silk'n Silhouette™ ושאר הרכיבים מן האריזה.
2. יש לחבר את הכבל של ספק הכוח אל השקע של ביחידת הסרת השיער Silk'n Silhouette™.
3. יש לחבר את ספק הכוח אל שקע החשמל. כל שלוש נוריות החיווי תהבהבנה בזו אחר זו.
4. מכשיר ה Silk'n Silhouette™ נמצא כעת במצב המתנה ומוכן לפעולה.

### יש לטפל באמצעות מכשיר ה Silk'n Silhouette בצורה נכונה ובאופן בטוח!

5. משחו שכבה דקה של ג'ל על השטח המיועד לטיפול.
6. לחילופין, מרחו כמות נדיבה של ג'ל על שטח הטיפול של המכשיר. תפקידו של הג'ל להוביל את האנרגיה בצורה טובה יותר לתוך העור, לטובת תוצאות אופטימאליות.
6. לחצו על כפתור ברירת מצב טיפול. נורת חיווי מצב טיפול 1 תידלק.
7. הצמידו את שטח הטיפול של המכשיר לעור. העור באזור הטיפול חייב להיות נקי, יבש וחופשי מחומרי לחות ומשחות.

## מצבי טיפול

Silk'n Silhouette™ מציע שלושה מצבי טיפול המיוצגים על-ידי שלוש נורות חיזוי.

מצב הטיפול קובע את סוג האנרגיה הנשלחת מו Silk'n Silhouette™ אל העור. המצבים שונים זה מזה ומשלימים זה את זה.

קביעת מצבי טיפול

- על מנת לקבוע את מצב הטיפול, לחצו על כפתור ברירת מצב טיפול שוב ושוב כדי לעבור בין המצבים.
- נמוך: רמת אנרגיה 1
- בינוני: רמת אנרגיה 2
- גבוה: רמת אנרגיה 3
- עם בחירת מצב הטיפול הרצוי, נורת החיזוי המתאימה תורה את מצב הטיפול שנבחר.



גבוה

רמת אנרגיה 3



בינוני

רמת אנרגיה 2



נמוך


רמת אנרגיה 1

8. הצמידו את המכשיר לשטח הטיפול הנבחר. תחושו תחושת חמימות קלה.
9. הניעו את המכשיר בתנועות עיסוי עדינות לאורך השטח המטופל (מותניים, עכוז, ירכיים, ירכיים, שוקיים, גב, בית החזה, בטן וזרועות). התקדמו באיטיות ובזהירות.
10. להחלפת מצב הטיפול תוך כדי טיפול, לחצו שוב על כפתור ברירת מצב הטיפול. הלחיצה תשנה את מצב הטיפול באותו רגע ותאפשר טיפול באותו אזור או באזורים אחרים, במצב טיפול שונה, בהתאמה לצרכים שלכם.

## 7. שגרת טיפול

הטיפול ב Silk'n Silhouette™ הוא קל! עקבו אחר האיורים ואתם בדרך למראה חדש לטיפול ראשון בכל אזור גוף, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות כאן. החל מהטיפול השני ומעלה, תוכלו לעבור לטפל ברמות אנרגיה 2 ו 3!

### עכוז

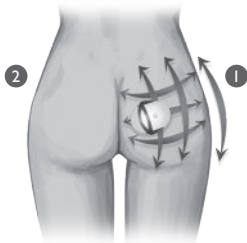

15:00

גבוה

05:00


בינוני

בכל צד

02:00

נמוך

### מותניים

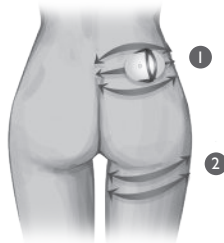

10:00

גבוה

05:00

בינוני

בכל איזור

02:00

נמוך

## שוקיים



10:00

גבוה

05:00

בינוני

בכל צד

02:00

נמוך

## ירכיים



15:00

גבוה


04:00

בינוני

02:00

נמוך

## בית החזה

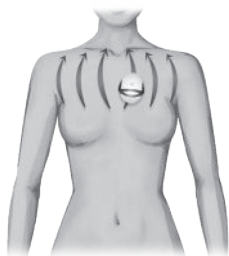

10:00

גבוה


04:00

בינוני

03:00

נמוך

## גב

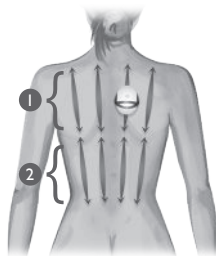

12:00

גבוה

05:00

בינוני


04:00

נמוך

בכל איזור



## זרועות

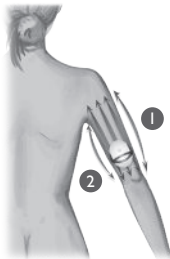

10:00

גבוה


05:00

בינוני  
בכל צד

02:00

נמוך

## בטן

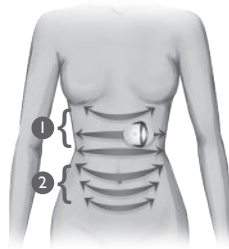

15:00

גבוה

06:00

בינוני  
בכל איזור

05:00

נמוך

### 7.1 למה לצפות בזמן הטיפול ב Silk'n Silhouette™

יש מי שהשימוש ב Silk'n Silhouette™ יהווה עבורם התנסות ראשונה במכשיר מבוסס חום לשימוש ביתי. Silk'n Silhouette™ פשוט להפעלה, והטיפולים יחלפו במהרה. בזמן הטיפול ב Silk'n Silhouette™ סביר לחוות או להרגיש:

- תחושת חמימות - במשך כל טיפול, סביר להרגיש תחושה קלה של חום המגיע מאנרגיית החום.
- אדמומיות קלה או ורדרדות- במשך יומים אחרי הטיפול ב Silk'n Silhouette™ נראית לעתים קרובות אדמומיות קלה או ורדרדות של העור.

בכל מקרה שנראית אדמומיות מלאה של העור, שלפוחיות או כוויות יש להפסיק את הטיפול ב Silk'n Silhouette™ מיד.

### לקבלת התוצאות הטובות ביותר, היצמדו ללוח הטיפולים הבא

התחילו בשני טיפולים בשבוע לתקופה של 10 שבועות ותנו לגופכם טיפול מרוכז. לאחר התקופה הזו תוכלו לראות שינוי במצב העור וההיקפים. שמרו על התוצאות באמצעות טיפול דו-שבועי.

שימו לב: תוצאות אופטימאליות מושגות באמצעות הקפדה על שגרת הטיפול!



## 7.2 לאחר הטיפול ב Silk'n Silhouette™

- כאשר הושלם הטיפול ב Silk'n Silhouette™ יש לכבות את המכשיר על ידי ניתוקו ממערכת החשמל. הוציאו את חוט החשמל משקע החשמל.
- אחרי כל טיפול מומלץ לנקות את המכשיר ובייחוד את שטח הטיפול של המכשיר (יש לעיין: ניקוי Silk'n Silhouette™).
- אחרי הניקוי מומלץ לאחסן את המכשיר באריזה המקורית ולהרחיק אותו ממים.

## 8. תחזוקת Silk'n Silhouette

### 8.1 ניקוי Silk'n Silhouette™

- לאחר כל טיפול בצלולים והצרת היקפים, מומלץ לנקות את מכשיר ה Silk'n Silhouette™ ובייחוד את משטח הטיפול. יש לנתק את המכשיר מן החיבור לחשמל לפני הניקוי.
- יש לנתק את Silk'n Silhouette™ מן החיבור לחשמל לפני הניקוי.
- יש להשתמש בנייר סופג כדי לנגב בעדינות את שאריות הג'ל ממשטח הטיפול Silk'n Silhouette™.
- לעולם אין לטבול את Silk'n Silhouette™ או חלקים ממנו במים!

## 9. פתרון בעיות

### “מכשיר ה Silk'n Silhouette™ שלי אינו פועל”

- וודאו כי חוט החשמל מחובר כראוי אל מכשיר ה Silk'n Silhouette™.
- וודאו כי חוט החשמל מחובר כראוי לשקע החשמלי בקיר.
- “המכשיר לא פולט חום ואני לא מרגישה חום יוצא מהמכשיר אפילו כשאני לוחצת על כפתור ברירת מצב טיפול”
- חום לא ייפלט מהמכשיר אם משטח הטיפול לא צמוד לעור. זוהי תכונת בטיחות מובנית במכשיר. וודאו כי המכשיר מוצמד לעור לפני תחילת הטיפול.

אין לנסות ולפתוח או לתקן את מכשיר ה Silk'n Silhouette™. רק מרכזי התיקון המורשים של Silk'n™ רשאים לבצע תיקונים.




- פתיחת מכשיר Silk'n Silhouette™ עלולה לקלקל אותו ולבטל את תוקף האחריות שבידך.
- יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות אם ברשותך מכשיר שבור או טעון תיקון.

## 10. שרות לקוחות

למידע נוסף על מוצרי Silk'n™ היכנסו לאתר [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il) אם המכשיר שברשותך נשבר, נפגע, טעון תיקון או כל סיוע אחר, יש לפנות אל מרכז שירות הלקוחות. למרכז שירות הלקוחות בישראל התקשרו לטלפון 1-700-700-309, או כתבו ל [info@silkn.co.il](mailto:info@silkn.co.il) [contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il)

## 11. מפרט

TMHT	טכנולוגיה	
620nm±20nm	אורך גל אור אדום	
850nm±20nm	אורך גל IR	
MHz ±30%; 24W max I	תדר גלי רדיו	
מייצב חום למניעת התחממות יתר של העור	תפעול ובטיחות	
22cm X 22cm X 14cm	מידות האריזה	
200gr	משקל המערכת	
10°C to 35°C	תפעול	טמפרטורה
to +70°C -40	אחסנה	
to 75%rH 30	תפעול	לחות יחסית
to 90%rH 10	אחסנה	
to 1060hPa 700	תפעול	לחץ אטמוספירה
to 1060hPa 500	אחסנה	
Model: KSAPVO361200300D5	מתאם	
100-240V; 50-60Hz; 0.9A	דירוג	
12Vdc; 3A	פלט	

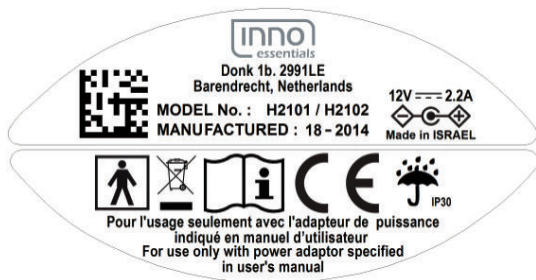

 Degree of protection against electric shock: type BF applied part

 WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

 Follow operating instructions

 CE Mark

 Do not use this appliance in a wet surrounding